

Manual de instrucciones

Camilla de masaje

61175-61177

toboli



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.


Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- Cuide la camilla con regularidad. Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados y de que el cable no esté dañado o deshilachado. Asegúrese de que no haya grietas en la estructura de madera.
- No sobrecargue la camilla de masaje más allá del límite de carga recomendado.
- No utilice agentes de limpieza a base de alcohol para limpiar la hoja de vinilo. Esto puede dañar estos materiales. Use agua caliente y jabón y séquelo posteriormente.
- Al utilizar la camilla, asegúrese de que las cuatro patas estén sobre una superficie firme y a la misma altura.

Instalación de la camilla

- Coloque la camilla sobre uno de los laterales, suelte las hebillas, abra parcialmente la camilla y extraiga los accesorios.
- Colocado de pie detrás de la camilla, coja ambos agarres con las manos y mueva la camilla suavemente hacia afuera para abrirla por completo. Las patas deberían desplegarse automáticamente.
- Ponga de pie la camilla levantándola. Presione en el medio para asegurarse de que queda plana. Si la parte central estuviera levantada, compruebe el cable y enderézelo.

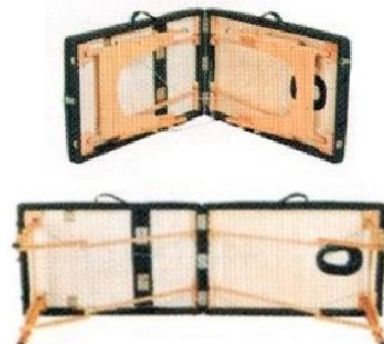

Utilización de la camilla y accesorios

Le ofrecemos accesorios adicionales. Lea detenidamente el manual de instrucciones antes del uso.

Reposacabezas

El reposacabezas consiste en una base con forma de media luna y una almohadilla facial, también de la misma forma. Este accesorio proporciona un cómodo apoyo para la cabeza y el rostro. El reposacabezas ajustable es fácil de montar. Cambie el ángulo y la altura de la base ajustando el mango de la base.



Superficie reposabrazos regulable

Este reposabrazos regulable es un buen dispositivo para apoyar los brazos de la persona tumbada en la parte delantera de la camilla. Cuelgue el "estante" reposabrazos en las dos barras del reposacabezas y deslice la correa hacia arriba o hacia abajo para ajustar la posición óptima.



Extensión lateral para brazos

Su nueva camilla de masaje dispone de una extensión lateral para brazos. Estos reposabrazos extraíbles y acolchados ofrecen una superficie óptima de descanso. Los accesorios encajan en los agujeros correspondientes a cada uno de los lados de la camilla y proporcionan un descanso confortable, especialmente a aquellas personas de mayor estatura.

Ajuste de la altura

La altura correcta de la camilla viene determinada por la estatura del terapeuta, la modalidad y la técnica de masaje. Para ajustar la altura quite el pomo de cada una de las patas, ajuste las patas a la altura deseada y, por último, coloque de nuevo el pomo.

Límite de carga de la camilla (peso)

- La colocación de la persona en el centro de la camilla contribuye a una distribución uniforme del peso y a garantizar la estabilidad. En primer lugar, siéntese cerca del centro de la mesa (pero no sobre el centro), luego lo más cerca posible del centro (desde el borde). El peso de trabajo es el peso combinado de la persona sobre la camilla y el grado máximo de presión descendente que el terapeuta ejerce. El peso máximo de trabajo de la camilla es de 150 kg.
- P. ej. en el caso de una persona que pese 80 kg, el grado máximo de presión descendente que se puede aplicar con seguridad es de 70 kg. Dado que la presión en un ángulo lateral carga mucho más la camilla, la presión lateral máxima que se aplique no debe exceder el 50 % del grado máximo de presión descendente.
- **¡NUNCA EXCEDA EL PESO MÁXIMO INDICADO!** ¡Nunca exceda los límites de carga de la camilla! de lo contrario, podrían producirse lesiones y/o daños graves.

Almacenaje de la camilla

- Sujete la base del reposacabezas y la almohadilla para la cara a la banda de goma debajo de la mesa, como se muestra en la ilustración. Coloque cada accesorio en su posición original, como se muestra en la ilustración.
- La bolsa de transporte debe utilizarse para proteger la camilla de posibles daños durante el transporte o el almacenaje. Cuando no se utilice, la camilla se debe guardar en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa. No exponga la camilla a temperaturas extremas (calientes o frías) o a la humedad.



Cubierta de la camilla



Cuidado

Acolchado

- **Limpieza diaria:** elimine la suciedad diaria con una loción jabonosa tibia. Seque con un paño suave que no deje pelusas.
- **Desinfección:** desinfecte la camilla, en caso necesario, con una solución desinfectante de uso sanitario a base de isopropanol (apto para uso en vinilo de poliuretano).
- **Eliminación de manchas:** Las manchas más pequeñas se pueden eliminar con un limpiador suave y no abrasivo. Aplique limpiador en un paño húmedo, limpie cuidadosamente, enjuague la zona con agua tibia y séquela con un paño suave que no deje pelusas. Las manchas más resistentes pueden requerir limpieza profesional.

Madera

Su camilla está fabricada en madera dura seleccionada y lacada. Esta madera no requiere ningún cuidado especial. Si lo desea, puede pulirla utilizando productos adecuados de alta calidad.

Instrucciones de montaje para reposacabezas y reposabrazos

1. Pase los brazos del reposacabezas en forma de tubo (tubos) por los lazos de ambas correas del reposabrazos.



2. Coloque los brazos en forma de tubo del reposacabezas (tubos) en los agujeros dispuestos para ello en la camilla y bloquee la posición con la palanca de bloqueo del reposacabezas.



3. Ajuste el reposabrazos a la posición horizontal deseada y apriete las correas de forma correspondiente.

4. Sujete la almohadilla para el rostro con el cierre de velcro incluido en el reposacabezas.



Uso del reposacabezas ajustable en 6 posiciones

1. Inserte los tubos del soporte para la cara en los agujeros.
2. Coloque la palanca de bloqueo de manera que se extienda en horizontal hacia afuera y los surcos queden en la parte superior.



3. Ajuste el reposacabezas en la posición deseada y mueva la palanca hacia abajo para bloquearlo. Mantenga la camilla seca y evite usarla en ambientes húmedos o mojados. Si la camilla se moja, séquela rápidamente con un paño suave.

Ajuste del respaldo

- Después de quitar el seguro, es posible levantar el respaldo. Ajústelo a la posición deseada.
- A continuación, vuelva a colocar el seguro.



AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.