

## Istruzioni per l'uso

### Lettino per massaggi

61175-61177

# toboli



Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15,

## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.


**Conservare questo manuale in un luogo sicuro.**

## Indicazioni di sicurezza

- Eseguire regolarmente la manutenzione del lettino. Assicurarsi che tutte le viti siano strette e che il cavo non sia danneggiato o sfilacciato. Assicurarsi che non ci siano lesioni sulla struttura del legno.
- Non sovraccaricare il lettino per massaggi oltre il limite di carico raccomandato.
- Non utilizzare detergenti a base di alcol per la pulizia del foglio in vinile. Ciò può danneggiare il materiale vinilico. Usare acqua calda e sapone e poi asciugare.
- Quando si impiega il lettino assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano su una superficie solida e alla stessa altezza.

## Collocazione del lettino

- Posizionare il lettino su un lato, allentare le fibbie, aprirlo parzialmente e rimuovere gli accessori.
- Stando in piedi dietro il lettino, afferrare entrambe le maniglie del ripiano e spostare delicatamente il lettino con un movimento verso l'esterno per aprirlo completamente. Le gambe dovrebbero aprirsi automaticamente.
- Girare il lettino in posizione verticale sollevandolo. Premerlo al centro verso il basso per assicurarsi che sia completamente aperto. Se è sollevato al centro, controllare e allineare il cavo.

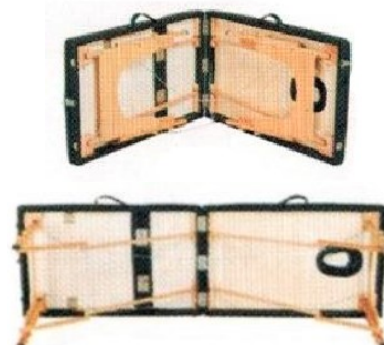

## Impiego del lettino e degli accessori

Offriamo accessori opzionali. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

### *Poggiatesta*

Il poggiatesta è costituito da una base e da un cuscino per il viso a forma di mezzaluna. Offre al cliente un comodo supporto per la testa e il viso. Si può avere una variante diversa per la base del poggiatesta. Il poggiatesta regolabile è facile da montare. È possibile modificare l'angolo e l'altezza della base tramite la maniglia della base.



### *Bracciolo regolabile*

Il bracciolo regolabile è un comodo dispositivo per sostenere le braccia del cliente nella parte anteriore del ripiano. Appendere il bracciolo alle due aste del poggiatesta e far scorrere la cinghia su o giù per raggiungere la posizione ottimale.



## Estensione del braccio laterale

Il lettino per massaggi dispone di un'estensione laterale per poggiare le braccia. Questi braccioli laterali imbottiti e rimovibili forniscono una superficie di appoggio ottimale. Si inseriscono nei fori per gli accessori corrispondenti posti su ogni lato del ripiano. Ciò offre ai clienti un comodo supporto per le braccia, soprattutto per i clienti più grandi.

## Regolazione dell'altezza

L'altezza corretta per sdraiarsi è determinata dalle dimensioni del terapeuta, dal tipo e dalla tecnica di massaggio. È possibile regolare l'altezza rimuovendo la manopola della maniglia da ciascuna gamba. Riposizionare le manopole dopo aver posizionato ogni gamba nella posizione desiderata.

## Limite di carico del lettino (peso)

- Far posizionare il cliente al centro del ripiano aiuta a distribuire il peso in modo uniforme e a garantire la stabilità. Per prima cosa sedersi con attenzione vicino (non sopra) il centro del lettino, quindi avvicinarsi il più possibile al centro (dal bordo). Il peso di lavoro è il peso combinato del cliente e della quantità massima di pressione verso il basso che il terapeuta applica. Il peso massimo di lavoro per il ripiano è di 150 kg.
- Per esempio: per un cliente che pesa 80 kg, la massima pressione verso il basso che può essere esercitata in sicurezza è di 70 kg. Poiché la pressione su un angolo laterale mette maggiormente sotto sforzo il lettino, la pressione laterale massima non dovrebbe superare il 50 % della pressione massima verso il basso.
- **NON SUPERARE IL PESO MASSIMO INDICATO!** Non superare mai i limiti di carico del lettino! In caso contrario, possono verificarsi gravi lesioni e/o danni!

## Stoccaggio

- Attaccare la base del poggiatesta e il cuscinetto per il viso all'elastico sotto il ripiano, come mostrato. Mettere ogni accessorio nella sua posizione originaria, come mostrato nell'illustrazione.
- La borsa da trasporto deve essere utilizzata sia quando si trasporta che quando si conserva il lettino per proteggerlo da possibili danni. Quando non viene utilizzato, conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole. Non esporre il lettino a livelli estremi di temperatura (caldo o freddo) o di umidità.



## Custodia del lettino



## Cura

### Imbottitura

- **Pulizia quotidiana:** rimuovere lo sporco quotidiano e la sporcizia dal lettino con una soluzione di acqua saponosa delicata e calda. Asciugare con un panno morbido e privo di lanugine.
- **Disinfezione:** disinfettare il ripiano, secondo necessità, con un detergente ospedaliero a base di isopropanolo (approvato per l'uso su vinile di poliuretano).
- **Rimozione delle macchie:** alcune piccole macchie possono essere rimosse con un detergente delicato e non abrasivo. Spruzzare un panno umido con il detergente e pulire delicatamente le macchie, sciacquare abbondantemente con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido e privo di lanugine. Macchie più ostinate possono richiedere una pulizia professionale.

### Legno

Il lettino per massaggi è realizzato in legno duro selezionato laccato, quindi non richiede cure particolari. Se lo si desidera, lo si può lucidare occasionalmente con prodotti per la cura del legno di alta qualità.

## Istruzioni di montaggio per poggiatesta e bracciolo

1. Far passare i bracci tubolari del poggiatesta attraverso i passanti delle due cinghie del bracciolo.



2. Inserire i bracci tubolari nei fori del poggiatesta nel ripiano e bloccare la posizione con la leva di bloccaggio del poggiatesta.



3. Regolare il bracciolo nella posizione orizzontale desiderata e stringere di conseguenza tutte le cinghie.

4. Attaccare il cuscino al poggiatesta con la chiusura in velcro in dotazione.



## Impiego del poggiatesta regolabile in 6 posizioni

1. Inserire i bracci del tubo del supporto facciale nelle aperture.
2. Posizionare la leva di bloccaggio in modo che si estenda orizzontalmente verso l'esterno e le scanalature siano in alto.



3. Regolare il poggiatesta come desiderato e spostare la leva verso il basso per bloccarlo in posizione. Mantenere il ripiano asciutto ed evitare di utilizzarlo in un ambiente bagnato o umido. Se dovesse bagnarsi, asciugalo velocemente ed accuratamente con un panno morbido.



## Regolazione in altezza della sezione posteriore

- Dopo aver rimosso il fermo all'estremità, si può sollevare il ripiano posteriore. Regolarlo nella posizione desiderata.
- Dopo aver regolato il ripiano posteriore alla sua altezza massima, riposizionare il dispositivo di fissaggio.



Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale è ammessa solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.