

Gebruikershandleiding

Massagetafel

61175-61177

toboli



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan verneemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel.: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 5559215)

Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de inhoud ervan begrepen heeft.


Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Veiligheidsaanwijzingen

- Onderhoud het ligbed regelmatig. Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastzitten en dat de kabel niet beschadigd of versleten is. Zorg ervoor dat er geen scheuren in de houtstructuur aanwezig zijn.
- Belast de massagetafel niet boven de aanbevolen maximale belastingsgrens.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen op alcoholbasis om het vinyl te reinigen. Hierdoor kan schade aan het vinylmateriaal ontstaan. Gebruik een warm sopje en veeg de oppervlakken daarna droog.
- Let erop dat alle vier de poten op een stevige ondergrond en op dezelfde hoogte staan wanneer u de massagebank gebruikt.

Het opzetten van de ligbank

- Leg de massagetafel op zijn kant, haal de gespen los, open de bank gedeeltelijk en verwijder de toebehoren.
- Ga achter de ligbank staan, pak beide handgrepen vast en beweeg de bank voorzichtig naar buiten om deze volledig te openen. De poten gaan vanzelf open.
- Til de bank op en zet hem rechtop. Druk de bank in het midden naar beneden om er zeker van te zijn dat de bank volledig is uitgeklappt. Ligt hij in het midden omhoog, controleer dan de kabel en lijk hem uit.

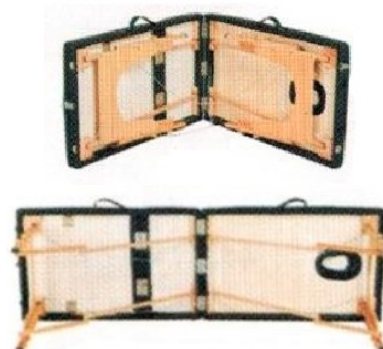

Gebruik van de ligbank en toebehoren

Wij bieden optionele accessoires. Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik zorgvuldig door.

Hoofdsteun

De hoofdsteun bestaat uit een halvemaanvormige hoofdsteunbasis en een halvemaanvormig gezichtskussen. Het geeft uw klant een comfortabele ondersteuning voor hoofd en gezicht. Het kan zijn dat u een andere variant heeft voor de hoofdsteunbasis. De verstelbare hoofdsteun is gemakkelijk te plaatsen. Verander de hoek en de hoogte van de basis door de hendel van de basis te verstellen.



Verstelbare armleuning

Dit verstelbare armsteun is een handig hulpmiddel om de armen van uw cliënt aan de voorkant van de tafel ondersteuning te bieden. Hang de armsteunplaat aan de twee stangen van de hoofdsteun en schuif de riem omhoog of omlaag voor een optimale positie.



Armverlengstuk zijkant

Uw nieuwe massagetafel heeft een armverlengstuk aan de zijkant. Deze afneembare, gevoerde armleuningen zorgen voor een optimaal ligvlak. Ze passen in de gaten voor toebehoren, aan beide zijden van het ligbed. Dit geeft uw klanten een comfortabele ondersteuning van de armen, vooral voor de wat groter geschapen klanten.

Hoogteverstelling

De juiste lighoogte wordt bepaald door de lengte van de therapeut, het soort en de techniek van de massage. U kunt de hoogte verstellen door de hendel van elke poot te verwijderen. Plaats de knoppen terug nadat u elke poot in de gewenste stand heeft gezet.

Maximaal draagvermogen van de bank (gewicht)

- Door de klant in het midden van de tafel te laten liggen wordt het gewicht gelijkmatig verdeeld en de stabiliteit gewaarborgd. Zit eerst voorzichtig in de buurt van het midden van de bank (niet erop), vervolgens zo dicht mogelijk bij het midden (vanaf de rand). Het werkgewicht is een combinatie van gewicht van de cliënt en de maximale hoeveelheid neerwaartse druk die door de therapeut wordt uitgeoefend. Het maximale werkgewicht voor de massagetafel bedraagt 150 kg.
- Voorbeeld: Voor een cliënt van 80 kg is de maximale veilige neerwaartse druk 70 kg. Aangezien de druk onder een zijwaartse hoek veel hoger is, mag de maximale zijwaartse druk niet meer dan 50 % van de maximale neerwaartse druk bedragen.
- **OVERSCHRIJD IN GEEN ENKEL GEVAL HET AANGEGEVEN MAXIMUMGEWICHT!** Overschrijd nooit het maximale draagvermogen van de ligbank! Dit kan anders tot zware verwondingen en/of letsel leiden.

Opslag

- Bevestig de hoofdsteunbasis en het gezichtskussen zoals afgebeeld aan de rubberen band onder de tafel. Plaats de toebehoren in hun oorspronkelijke positie, zoals aangegeven op de afbeelding.
- Gebruik de draagtas wanneer de massagetafel vervoerd of opgeborgen dient te worden, om deze tegen mogelijke schade te beschermen. Bij niet gebruik, bewaart u het ligbed op een koele, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht. Stel de ligbank niet bloot aan extreme (warme of koude) temperaturen of vochtigheid.



Koffer



Onderhoud

Kussen

- Dagelijkse reiniging: Verwijder dagelijks vuil en aanslag van de tafel met een mild en warm sopje. Veeg de tafel droog met een zacht, pluivrij doekje.
- Desinfectie: Desinfecteer de tafel indien nodig met een ziekenhuisreiniger op basis van isopropanol (goedgekeurd voor gebruik op polyurethaan vinyl).
- Vlekken verwijderen: Sommige kleine vlekken kunnen met een mild, niet-schurend reinigingsmiddel worden verwijderd. Neem een vochtig doek met schoonmaakmiddel en veeg de vlek voorzichtig weg, spoel grondig na met warm water en droog af met een zachte, pluivrije doek. Bij hardnekkige vlekken kan een professionele reiniging nodig zijn.

Hout

Deze massagetafel is gemaakt van zorgvuldig geselecteerd hardhout en voorzien van een laklaag, waardoor hij geen speciaal onderhoud nodig heeft. Bij behoefte kan het product af en toe met hoogwaardige houtverzorgingsmiddelen worden opgepoetst.

Montage van de hoofdsteun en arMLEuning

1. Steek de buisvormige armen van de hoofdsteun door de lussen van de twee arMLEuningriemen.



2. Steek de buisarmen via de gaten van de hoofdsteun in de tafel en zet de positie met behulp van de vergrendelingshendel van de hoofdsteun vast.



3. Stel de arMLEuning op de gewenste horizontale positie in en trek alle riemen daarbij aan.

4. Bevestig het hoofdkussen met het bijgeleverde klittenband aan de hoofdsteun.



Gebruik van de 6-voudig verstelbare hoofdsteun

1. Steek de buisarmen van de gezichtshouder in de openingen.
2. Plaats de vergrendelingshendel zo dat hij horizontaal naar buiten uitsteekt en de groeven zich bovenaan bevinden.



3. Stel de hoofdsteun naar wens in en beweeg de hendel omlaag om deze vast te zetten. Houd de massagetafel droog en gebruik hem niet in een natte of vochtige omgeving. Mohct de tafel nat worden, droog deze dan snel en grondig af met een zachte doek.

Hoogteverstelling van het ruggedeelte

- Nadat de bevestiging aan het uiteinde is verwijderd, kan de achterste plank worden opgetild. Zet hem vervolgens in de gewenste stand.
- Nadat de achterste plank op de maximale hoogte is gebracht, zet u de vergrendeling er weer op.



Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.